


Server-Zugriff von den Arbeitsplätzen nach Passwortänderung wiederherstellen

Wenn Sie am Server das Passwort ändern, haben Ihre Arbeitsplätze möglicherweise keinen Zugriff mehr, was sich darin äußert, dass z.B. der Aufruf der Ultraschallbilder oder das Senden von Patienten in die Worklist nicht mehr funktionieren.

Um Abhilfe zu schaffen, muss das neue Passwort auch an den Arbeitsplätzen hinterlegt werden. Halten Sie dazu an den betroffenen Arbeitsplätzen die **Windows-Taste** gedrückt und drücken Sie zusätzlich die Taste **R**.



In das sich öffnende Fenster geben Sie **control keymgr.dll** ein und klicken auf **OK**.

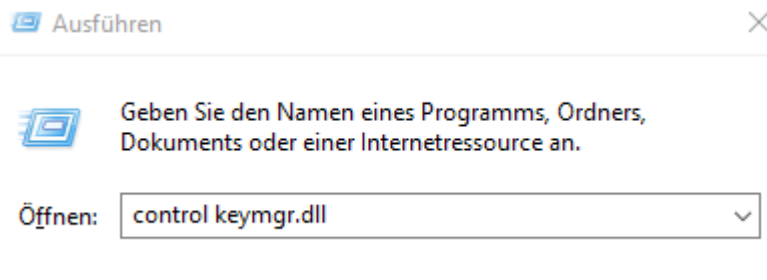


Im folgenden Fenster klicken Sie auf **Windows-Anmeldeinformationen**. Dort finden Sie einen oder mehrere Einträge für Ihren Server (der Name kann bei Ihnen anders lauten), die Sie anklicken und bearbeiten können:

Eigene Anmeldeinformationen verwalten

Sie können gespeicherte Anmeldeinformationen für Websites, verbundene Anwendungen und Netzwerke anzeigen und löschen.



Webanmeldeinformationen

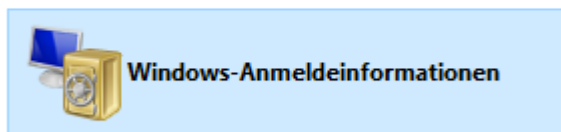

Windows-Anmeldeinformationen

[Anmeldedaten sichern](#) [Anmeldedaten wiederherstellen](#)

Server

Geändert: Heute

Internet- oder Netzwerkadresse: Server

Benutzername: Praxis

Kennwort:

Dauerhaftigkeit: Unternehmen

Bearbeiten Entfern

Ändern Sie dort das Passwort, danach sollte der Zugriff wieder funktionieren.