

# WordConnect, Umzug auf einen neuen Server


## 1. Folgen Sie der Anleitung zum Serverumzug mit sonoGDT

Die separate Anleitung beschreibt alle notwendigen Schritte, um sonoGDT vom alten auf den neuen Server umzuziehen. Am Ende sollten Sie dort eine aktuelle Version von sonoGDT mit den ursprünglichen Einstellungen der alten Installation vorliegen haben.

### 1. Deaktivieren der WordConnect-Lizenz am alten Server

Starten Sie am alten Server **sonoGDT\_Diagnose** (Icon auf dem Desktop des Servers, oder Start/Alle Programme/sonoGDT/sonoGDT\_Diagnose), Klicken Sie auf **Spezialkonfiguration**, dort wählen Sie den Karteireiter **WordConnect**. Klicken Sie rechts auf **Lizenz deaktivieren**.

Es öffnet sich ein Fenster (evt. ist es verdeckt und Sie müssen es von der Taskleiste in den Vordergrund holen).

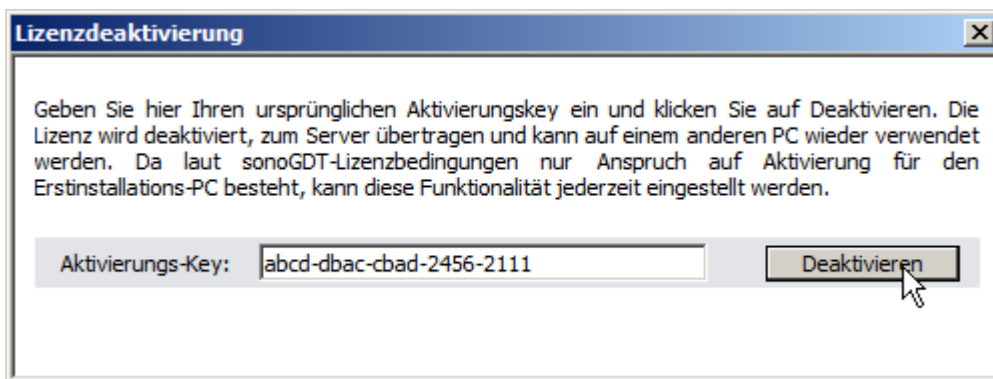

Geben Sie Ihren WordConnect Lizenzkey ein und klicken Sie auf **Deaktivieren**. Der Key wird an diesem PC deaktiviert und ist nun für einen neuen PC frei, Sie benötigen dazu Internetverbindung.

Klicken Sie anschließend auf **Lizenzserver stoppen**, damit der WordConnect Dienst beendet wird.

### 3. Anpassen des Hostnamens

Wenn sich der Name des neuen Servers vom Namen des alten unterscheidet, öffnen Sie nun am neuen Server die Datei `..\sonoGDT\WordConnect\netkey.ini` und passen Sie dort unter **Host** den Namen an.

### 4. Aktivieren der WordConnect-Lizenz am neuen Server

Öffnen Sie am neuen Server **sonoGDT\_Diagnose**, klicken Sie auf **Spezialkonfiguration**, wählen Sie den Karteireiter **WordConnect**. Klicken Sie nun auf **Lizenzserver starten** und anschließend **Lizenz aktivieren**. Geben Sie Ihren WordConnect Lizenzkey dort ein, damit ist die Aktivierung abgeschlossen.